

一次性使用中心静脉导管套装(经外周穿刺用)

规格型号	产品规格
PF-A 4Fr×60cm	4Fr×60cm 单腔 (紫色管)
PF-A 5Fr×60cm	5Fr×60cm 双腔 (紫色管)
PF-A 5Fr2x60cm	5Fr×60cm 双腔 (紫色管)
PF-A 6Fr2x60cm	6Fr×60cm 双腔 (紫色管)
PF-A 6Fr3x60cm	6Fr×60cm 三腔 (紫色管)



佛山市昊宁康医疗器械有限公司
电话: 0757-82369566
地址: 广东省佛山市禅城区城门口西路1号环球国际1205
昊朗科技(佛山)有限公司
销售部: 0757-88027058
地址: 广东省佛山市禅城区南庄吉利工业园新源2路39号

昊 朗

经外周穿刺中心静脉导管

耐受高压 一管多能




- 一体成型外延管接头
不易开裂，强度高，
不易漏液



- 易识别导管夹
拇指夹方便操作，
最大流速标识清晰可见



- 低剖面导管座
低剖面设计，
兼容缝合线和思乐扣两种固定方式

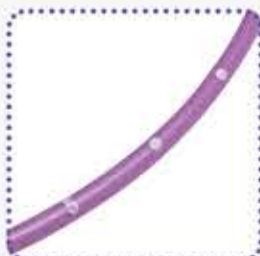

- 改良型聚氨酯材质
防止血栓形成
不滋生微生物，降低形成生物膜几率
体温下变柔软，不易断裂、打折

- 清晰的厘米刻度标识
便于操作者评估植入长度

- X射线不透性
X光胸透下，管体清晰可见，便于定位



耐受高压

一管多能

- ✓ 适用于CT造影剂注射

最高可耐受300psi
可满足多次静脉团注

- ✓ 进行中心静脉压监测

准确性与CVC监测效果一致

- ✓ 可同时输注多种药物

单腔、双腔、三腔导管满足
临床对于用药的不同需求

- ✓ 实现高速补液

流速高，可做高压注射



- 钛合金导引导丝
不易打折，扭曲，具有更强回弹性，
顺应性



- 可撕裂鞘
鞘芯与鞘管锁定接头设计为穿刺
过程提供可靠的连接。

- 套装内组件齐全
可根据需求定制配件，
方便临床使用