

Midline中等长度导管参数

| 规格 | 流速(ml/min) | 初始容积 |
|-----------------------------------|------------|-----------|
| PB-A 3Fr x 15cm / PB-B 3Fr x 15cm | ≥10 | 0.32 |
| PB-A 3Fr x 20cm / PB-B 3Fr x 20cm | ≥8 | 0.34 |
| PB-A 3Fr x 30cm / PB-B 3Fr x 30cm | ≥4 | 0.38 |
| PB-A 3Fr x 35cm / PB-B 3Fr x 35cm | ≥3 | 0.4 |
| PB-A 4Fr x 15cm / PB-B 4Fr x 15cm | ≥52 | 0.41 |
| PB-A 4Fr x 20cm / PB-B 4Fr x 20cm | ≥52 | 0.46 |
| PB-A 4Fr x 30cm / PB-B 4Fr x 30cm | ≥28 | 0.55 |
| PB-A 4Fr x 35cm / PB-B 4Fr x 35cm | ≥25 | 0.6 |
| PB-A 5Fr x 15cm / PB-B 5Fr x 15cm | ≥89 | 0.48 |
| PB-A 5Fr x 20cm / PB-B 5Fr x 20cm | ≥77 | 0.52 |
| PB-A 5Fr x 30cm / PB-B 5Fr x 30cm | ≥45 | 0.6 |
| PB-A 5Fr x 35cm / PB-B 5Fr x 35cm | ≥40 | 0.65 |
| PB-A 5Fr x 15cm / PB-B 5Fr x 15cm | ≥30 | 0.41/0.41 |
| PB-A 5Fr x 20cm / PB-B 5Fr x 20cm | ≥23 | 0.45/0.45 |
| PB-A 5Fr x 30cm / PB-B 5Fr x 30cm | ≥11 | 0.52/0.52 |
| PB-A 5Fr x 15cm / PB-B 5Fr x 35cm | ≥10 | 0.55/0.55 |



昊朗科技(佛山)有限公司

销售部: 0757-88027058

地址: 广东省佛山市禅城区南庄吉利工业园新源2路39号

ISO13485:2016
Certified Quality System



Midline中等长度导管
更可靠、更放心的基础输液工具



置管更便捷，不需要做导管尖端定位

适用科室

- ✓ 2018年，昊朗Midline 中等长度导管上市，在满足基础输液需求的同时，还满足儿科、妇产科、肿瘤科等特殊用药群体的输注需求。

留置时间30天以内

- ✓ 更好的填补了留置针（3-5天）和PICC（1个月一年）留置时间的空白



产品型号：单腔/双腔。

双腔导管的两个通道互不相通，避免了两种药物同时输注时的配伍禁忌，又达到同时输注治疗的目的。

一、何为中等长度导管 (Midline Catheter) ?

2011年美国输液护理学会《静脉输液治疗指南》提出：中等长度导管是经由贵要静脉、头静脉和肘正中静脉进入，尖端位置在腋窝水平或肩部远端，置入长度为7.5-20cm。


2011年，美国疾病预防控制中心在预防导管相关性血流感染指南中指出：中等长度导管的血流感染发生率低于中心静脉置管。



2016年，美国输液护士协会(Infusion Nurses Society, INS)静脉输液治疗护理实践标准推荐：输注外周静脉能耐受的抗生素、补液和镇痛药等药物和溶液，可应用中长导管。

多种解决方案供您选择

- 配有单腔、双腔各种尺寸、长度供您选择
- 配有套管穿刺针 (OTN) 的套件；改良型塞丁格 (MST) 的套件。

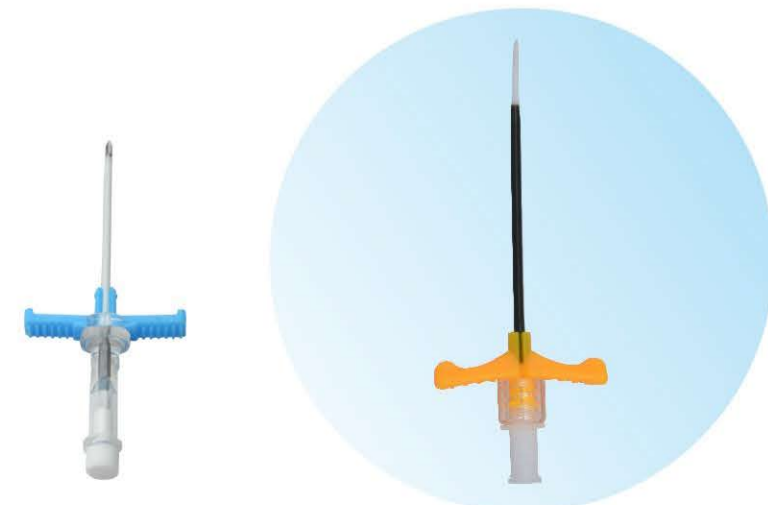

套管穿刺针 (OTN) 套件

改良型塞丁格 (MST) 套件